


LipoLas® – Laser Lift

Cilt sıkılaştırma ve vücut şekillendirme için minimal invaziv lazer tedavisi

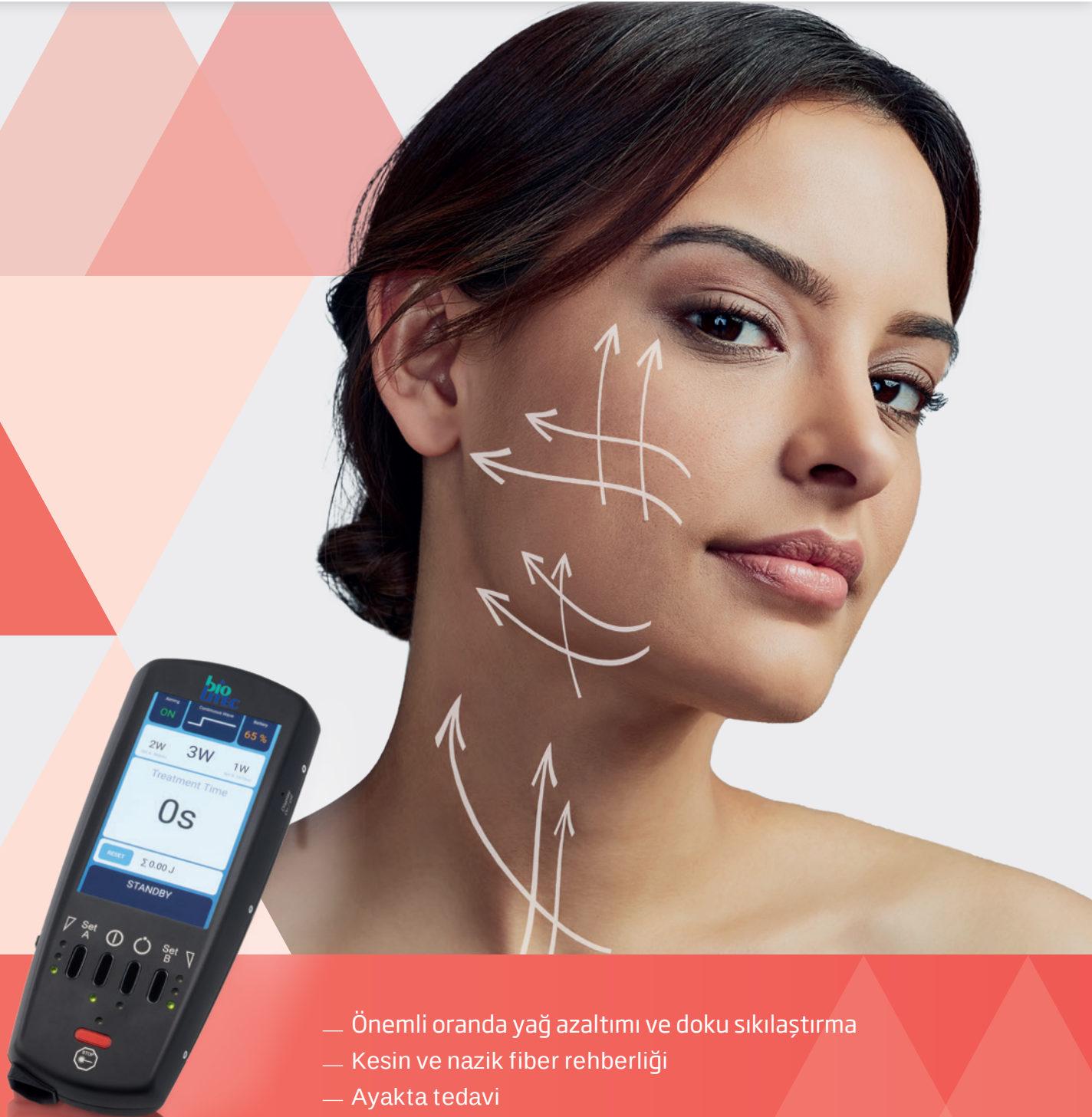

- Önemli oranda yağ azaltımı ve doku sıkılaştırma
- Kesin ve nazik fiber rehberliği
- Ayakta tedavi
- Kullanımda çok yönlü

Estetikte biolitec® LEONARDO® lazer

Adını evrensel deha Leonardo da Vinci'den alan LEONARDO® lazer, yenilikçiliği, teknik ilerlemeyi, dehayı, çok yönlülüğü, vizyoner gücü ve insan anatomisini temsil ediyor.

LipoLas® – Laser Lift

LipoLas® lazer tedavisinde LEONARDO® diyot lazer ailesi, atravmatik LipoLas® lazer fiberleriyle birlikte kullanıldığında mükemmel tedavi sonuçlarının temelini oluşturur ve kompakt, düşük bakım gerektiren ve kullanıcı dostu bir tasarıma sahiptir.

Teknoloji anatomiyle buluşuyor


Yağ azaltma ve doku sıkılaştırma uygulamaları




YÜZ




ÇENE

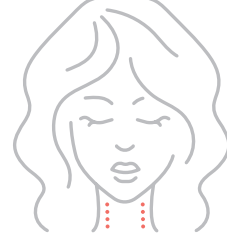


BOYUN

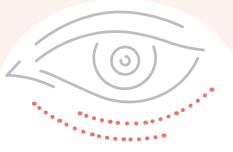


GÖZ

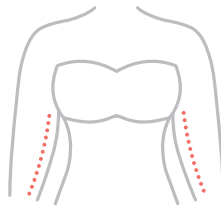


ÜST KOLLAR

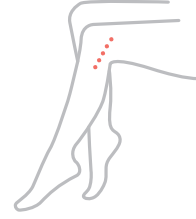

DİZ

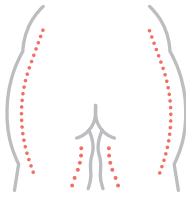

BASEN

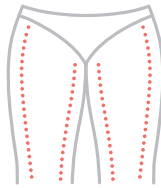

UYLUKLAR



GÖBEK

LipoLas® – Laser Lift

Nedir?

atravmatik
fiber ucu


LipoLas® - Laser Lift, yara izi bırakmadan cilt sıkılaştırma ve yağ azaltma için minimal invaziv bir işlemdir. İşlem, ayakta tedavi bazında lokal anestezi altında (örneğin TLA) veya liposuction ile birlikte yapılabilir. İnce bir lazer fiberi, tedavi edilecek dokuya deri altına yerleştirilir. Bunun için cilt kesisi gerekmez. İstenilen bölge, lazer enerjisinin yavaş ve yelpaze şeklinde salınmasıyla eşit şekilde tedavi edilir.

Lazer fiberin pozisyonu, pilot ışının cilt üzerinden görülebilmesiyle sürekli olarak kontrol edilir. Lazer ışığının dokudaki spesifik etkileşimi, kontrollü, hassas bir uygulama sağlar ve uzun vadeli iyi sonuçlar verir.

- Cildi sıkılaştırır ve gerginleştirir
- Fazla yağları azaltır
- Yüz ve vücudun diğer bölgelerindeki hatları belirgin hale getirir

Çalışma şekli

LEONARDO® isteğe bağlı olarak 1470nm ve 980nm olmak üzere 2 dalga boyuyla donatılmıştır ve bunlar su, yağ ve hemoglobinde yüksek emilim sağlar. Her iki dalga boyunun tamamlayıcı ve eş zamanlı kullanımı, aşırı yağ dokusunun optimum şekilde azaltılmasını ve çevre dokuların maksimum korunmasıyla mükemmel sıkılaşmayı sağlar. Lazer uygulanan küçük kan damarlarının sklerozu ve yeni kolajen fiberleri oluşumunun uyarılması nedeniyle, uygulama sonrası iyileşme süreci devam eder.

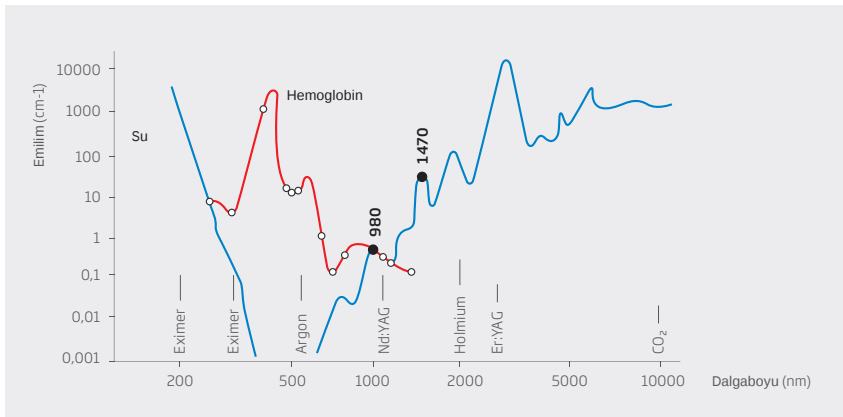

Hemoglobin ve
suda lazer
emilimi

Terapötik spektrumun genişletilmesi

İster büyük bir hastanenin ameliyathanesinde, ister bir cerrahi merkezde ayakta tedavi gören bir hasta olarak, isterse özel bir muayenehanede olsun - LEONARDO® lazer sisteminin kullanımı hekim için tedavi yelpazesini önemli ölçüde genişletmektedir.

LipoLas®'ın tarif edilen etki mekanizması sayesinde, ister göz, yüz ve boyun çevresindeki küçük ve hassas bölgeler, ister vücuttaki geniş bölgeler olsun, vücudun hemen hemen tüm bölgeleri sıkılaştırılabilir ve belirginleştirilebilir. LipoLas® ayrıca selülit olarak bilinen ciltteki çöküntülerin tedavisi için de idealdir.

LEONARDO® lazer sistemi salt estetik uygulamaların yanı sıra fleboloji, proktoloji, jinekoloji (LaEvita*) ve hidradenitis suppurativa tedavisi gibi diğer olası uygulama alanlarını da sunmaktadır.


* LaEvita, vajinal atrofi ve hafif stres inkontinansı tedavisinde yeni ve nazik bir çözümdür.

atravmatik
fiber ucu

LipoLas®-
Laser Lift
Fiber

LipoLas® - Laser Lift Avantajları

- İz bırakmayan minimal invaziv bir işlemdir
- Uzun vadeli etkili cilt sıkılaştırma sağlar
- Küçük cilt bölgelerinden fazla yağın alınmasını sağlar
- Yüz ve vücut bölgelerinin belirginleştirilmesini sağlar
- Neredeyse tüm cilt bölgelerinde kullanma imkanı sağlar

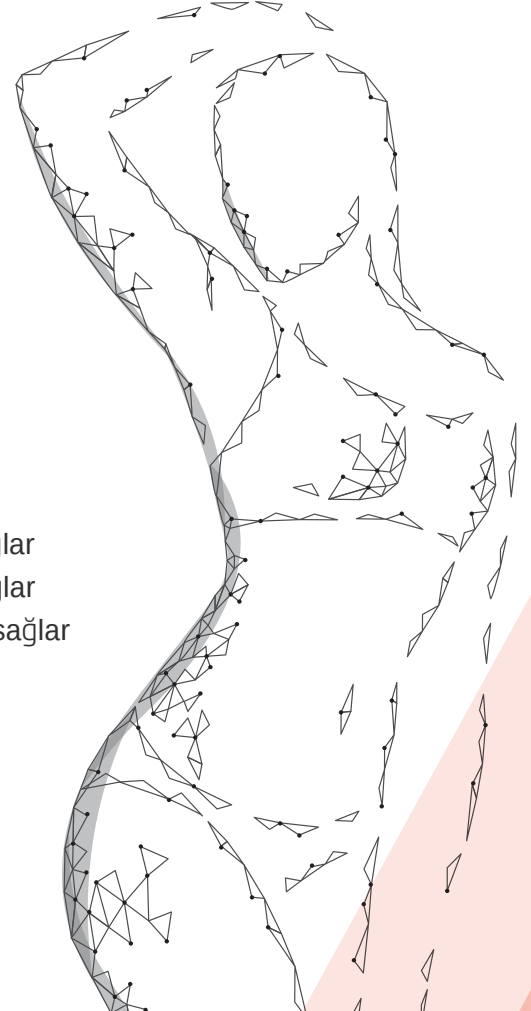



Sezgisel kullanım

LEONARDO® diyot lazer sistemi kompakt ve kullanıcı dostu tasarımıyla öne çıkıyor.

Avantajları

Kullanıcı dostu

- Dokunmatik ekran üzerinden sezgisel kullanım, hızlı kurulum
- Önceden ayarlanmış modlar ve kişisel ayarlar arasında seçim

Ekonomik


- Kompakt ve yerden tasarruf sağlayan tek bir diyot lazer sisteminde iki dalga boyu (LEONARDO® Dual)
- Güvenilir lazer diyotları sayesinde düşük bakım maliyeti



LEONARDO® lazer sistemleri

Teknik veriler	LEONARDO® Mini 1470	LEONARDO® DUAL 45
REF	SL1470nm12W	SL980+1470nm45W
Dalgaboyu	1470 nm	980 nm ve 1470 nm
Güç	12 W	45 Watt (1470 nm / 15 Watt + 980 nm / 30 Watt), bağımsız ayarlanabilir
Fiber çapı	≥ 360 µm	≥ 360 µm
Kılavuz ışın	635 nm, max. 4 mW	532 nm ve 635 nm, yeşil 1 mW, kırmızı 4 mW, kullanıcı ayarlı yoğunluk
Tedavi modu	CW, Atım Modu (opsiyonel), ELVeS® Signal	CW, Atım Modu, Derma Mode
Atım süresi / durma	0.01 – 60 sn. / 0.01 – 60 sn.	0.01 – CW / 0.01 – 60 sn.
Güç kaynağı	110 - 240 VAC, 50 - 60 Hz (7.2 VDC @ 36 W)	110 – 240 VAC, 50 / 60 Hz, 450 VA
Batarya	Li-ion batarya	
Ebatlar (Y x G x D)	6.0 cm x 9.0 cm x 21.5 cm	yaklaşık 28 cm x 37 cm x 9 cm
Ağırlık	900 g	yaklaşık 8.5 kg

Tüm lazer setleri 3 adet güvenlik gözlüğü, ayak pedalı, kilitleme konnektörü, güç kablosu ve kullanım kılavuzunu içeren taşıma çantasındadır.

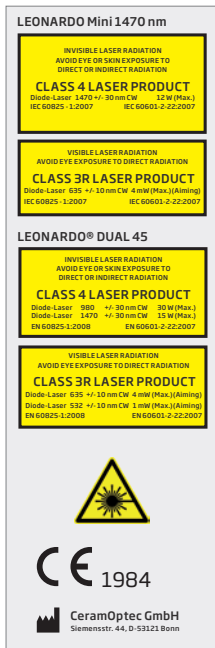

Fiberler

LipoLas® - Laser Lift

REF	Product	PU*	Length [m]	Ø fiber tip [µm]
503200292	Bare Fiber 365 µm, Flat Tip, IC	10	2.6	445
503805292	Bare Fiber 365 µm, Flat Tip, IC, A	10	2.6	445


LipoLas®

503500530	Bare Fiber 400 µm, Cylindrical Tip, IC	10	2.6	750
503500520	Bare Fiber 600 mic, Cylindrical Tip, IC	10	2.6	860
503500510	Bare Fiber 1000 mic, Cylindrical Tip, IC	10	2.6	1400

Aksesuarlar


AB5815-1	Y-Connector Pack
AB1633	Fine needle 21/150, Rev.A
400100100	Universal Dual Luer Handpiece

*Paket içeriği

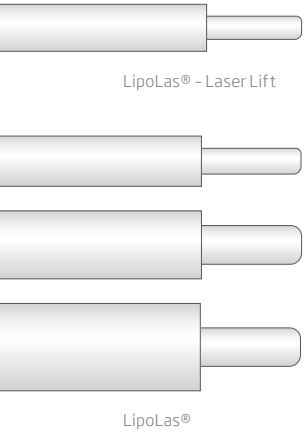

Bize ulaşın

minimal invaziv lazer tedavilerinin yepyeni dünyası hakkında daha fazla bilgi edinmek için

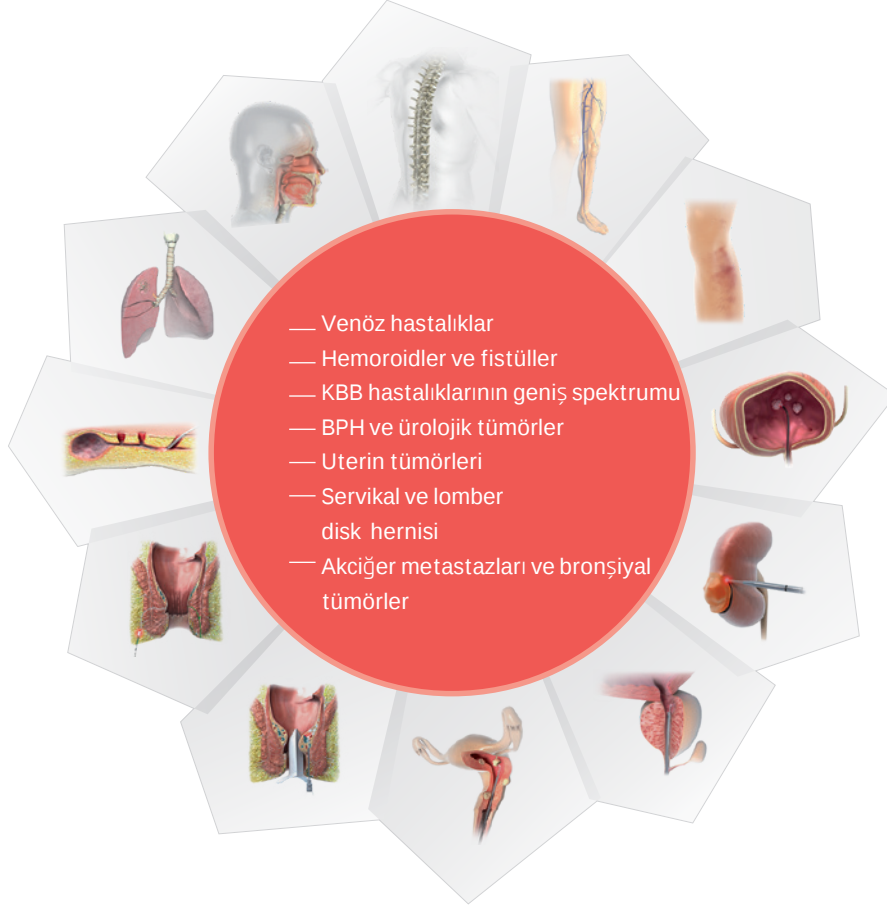

dünyada biolitec®

biolitec Holding GmbH & Co KG

Vienna, Austria
phone: +43 1 3619 909 50
info@biolitec.de
www.biolitec.com

biolitec biomedical technology GmbH

Jena, Germany
Phone: +49 3641 519 53 0

biolitec Schweiz GmbH

Wollerau, Switzerland
Phone: +41 55 555 30 20

biolitec España

Madrid, Spain
Phone: +34 91 9910857

biolitec Italia SRL

Milano, Italy
Phone: +39 02 8423 0633

biolitec Tıbbi Cihazları Ltd. Şti.

Istanbul, Turkey
Phone: +90 216 574 7456

OOO biolitec Spb

Saint-Petersburg, Russia
Phone: +7 812 4493752

biolitec FZ LLC

Dubai, UAE
Phone: +971 44 29 85 92

biolitec laser science and technology Shanghai Ltd.

Shanghai, China
Phone: +86 21 6308 8856

biolitec Sdn. Bhd.

Selangor, Malaysia
Phone: +60 3 5569 7158

biolitec India Private Ltd.

Bangalore, India
Phone: +91 93275 11005

PT. Biolitec

Tangerang, Indonesia
Phone: +62 21 295 57 419

biolitec Korea Ltd.

Seoul, Republic of Korea
Phone: +82 2 701 4707

Equipos Laser de Uso Médico y Fibra Óptica SA de CV

(Biolitec Mexico & Latín América)
Phone: +52 (55) 5573 1800

Biolitec Biotecnologia Comércio, Importação, Exportação LTDA

São Paulo, Brazil
Phone: +55 11 2093 8602

CeramOptec GmbH

Bonn, Germany
Phone: +49 228 979670

Ceram Optec SIA

Rīga, Latvia
Phone: +371 653 25 994



Tüm lifler lateks ve DEHP içermez.

Liflerimiz tek kullanımlık ürünlerdir (aksi belirtilmediği sürece) hemen kullanıma hazır steril olarak teslim edilir.

Imprint

biolitec Holding GmbH & Co KG
Untere Viaduktgasse 6/9
A-1030 Wien
Phone: +43 1 3619 909 50
www.biolitec.com